



TRSS

Manual de uso

SH 650 1 Laser

Terapia laser de reërecimiento de pelo en nivel bajo




Terapia laser de recrecimiento
de pelo en nivel bajo


Accesorios




Analizador de pelo

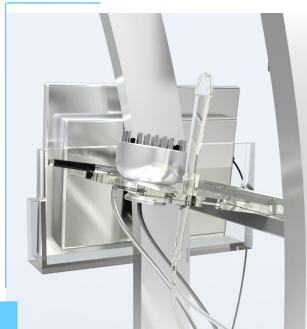

Casco

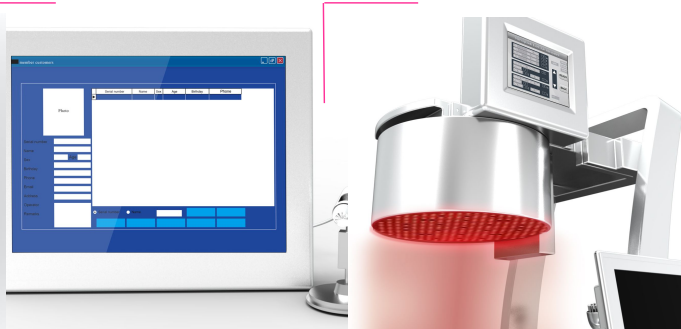

Sprayer de Medicina

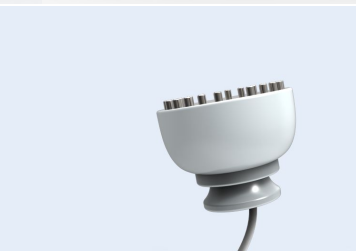

Microcurrent Peine del masaje



Spray de oxígeno



Características del producto

- Laseres y lámparas;
- Complementario medicina: Minoxidil;
- Fácil operación;
- Cómodo proceso de tratamiento;
- Resultados notables.

Tamaño de la máquina:
1630*550*500 mm(H*L*W)

Tamaño del paquete:
1650*580*580 mm(H*L*W)

Peso neto: 35 kg

Peso bruto: 55kg


Principio del tratamiento



Acelerar la circulación de la sangre para mejorar la capacidad de regeneración de las fibras de colágeno y estimular el metabolismo.

Láser de 650 nm y 630 nm PDT puede aumentar la actividad de trifosfato de adenosina (ATP) de tejido subcutáneo, y ATP es el medio de transmisión de energía principal entre las células que ayuda a estimular el metabolismo del tejido. Así 650nm y 625nm PDT ayudan a mejorar el flujo de la sangre y hacen de oxígeno y de nutrientes enviar a los folículos pilosos, y el láser de 808nm se ayuda a la penetración de la solución, como resultado, se consigue la eficacia de la detención de la progresión de la pérdida del cabello.

Treatment Principle

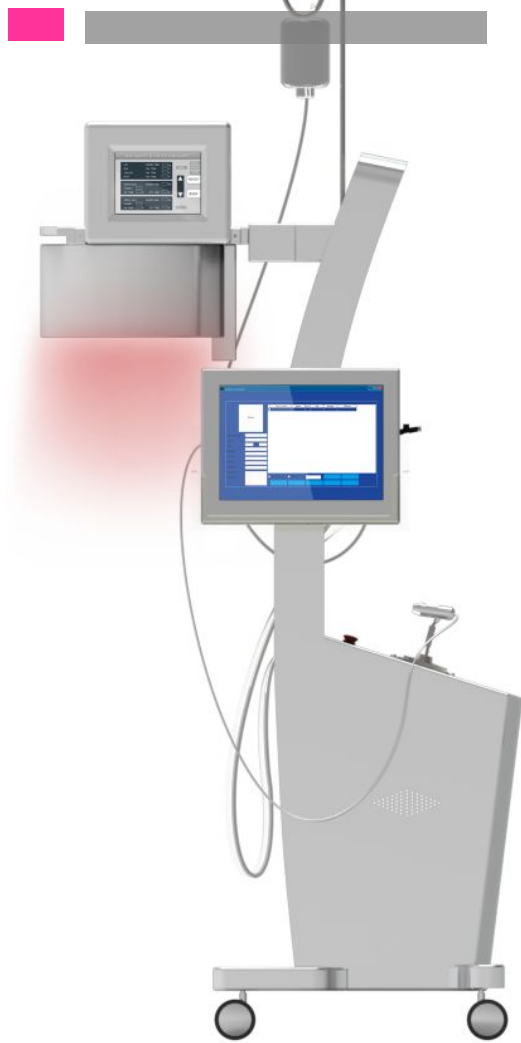

Modular los folículos pilosos

SH-650, la luz patentada de longitud de onda estrecha y EMS puede efectivamente estimular los folículos pilosos, y girar el 80% de los folículos pilosos que se encuentra en estado de hibernación al estado activo, y alcanzar el efecto de la cesación de la pérdida del cabello y la restauración.

Treatment Principle



Regular las secreciones de grasa

Secreción excesiva de grasa también es una razón para causar la pérdida del cabello, anormalidad de las glándulas sebáceas conduce a la secreción excesiva de grasa, mientras que dihidro testosterona Cave (DHT) en el petróleo liberado por las glándulas sebáceas se disparará más folículos pilosos disminución o incluso la contracción, pues, la pérdida de cabello es causada. SH-650 rejuvenecimiento del cabello puede dragar las glándulas sebáceas conducto para disminuir y controlar la secreción de grasa con el fin de mejorar la condición del cabello.

Principio del tratamiento

Promover la salud del cuero cabelludo, mejorar la calidad del cabello


SH-650 composite hair mask irradiates hair follicles to accelerate hair growth, and strengthen the hair elasticity and increase hair density making the hair pitch-black shine.

Promover la absorción de nutrientes

SH-650 es una fuente de luz fría patentado, que no le hará daño el pelo, no es ni química ni drogas, pero su penetración es mejor que ellos. Supera la debilidad de diversos productos químicos de fluido del cabello que no es capaz de infiltrar plenamente en la raíz del pelo.



Casco

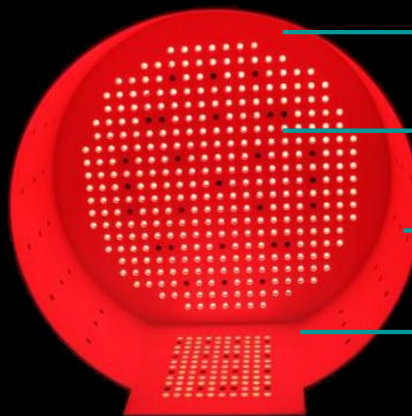

650nm Láser

808nm IR Láser

Aire spray

630nm Luz Roja

580nm Luz Amarilla

460nm Luz Azul

Resultado de tratamiento:

- Aumentar la densidad de cabello -40% -60%
- Tasa de éxito en detener la progresión de la pérdida del cabello-85%

Casco



Luz roja

Hacer la actividad de células aumentar, promover metabolismo de las células, acelerar la circulación de la sangre, y el control de la secreción de aceite.



Luz amarilla

Con longitud de onda de 580 nm puede aliviar y tratar eficazmente la piel sensible.



Luz azul

Matar las bacterias patógenas para el cabello con eficacia, matar los hongos y ácaros ocultos de profundidad en los folículos pilosos.

Analizador de Vello & Piel

Función:

- ▶ Analizar el folículo del pelo y el cabello
- ▶ Guardar la fecha el tratamiento de los pacientes
- ▶ Antes & Después, sigue el resultado

member customers

Serial number	Name	Sex	Age	Birthday	Phone
---------------	------	-----	-----	----------	-------

Photo

Serial number

Name

Sex

Age

Birthday

Phone


Email

Address

Operator

Remarks

Serial number Name

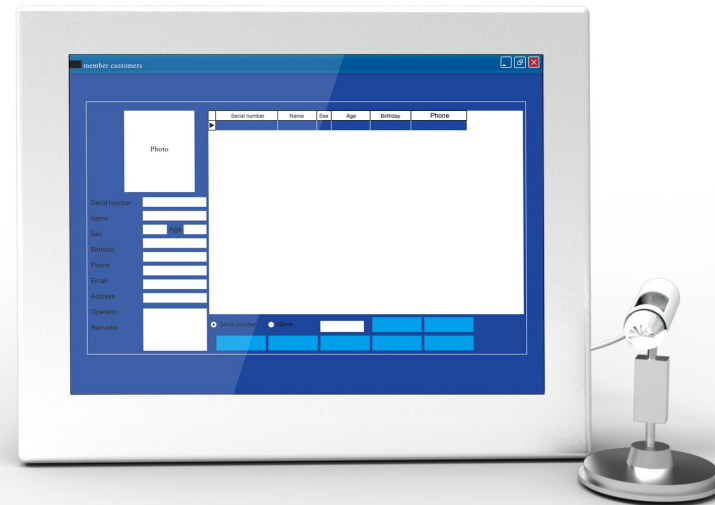

Pluma de spray de oxígeno



La pluma de spray de oxígeno puede generar aerosol salino por el flujo de aire generado por la máquina del pelo Terapia Recrecimiento y hacer un tratamiento simple de limpieza y desinfección en el cuero cabelludo.

Sprayer de Medicina



Spray la Solución de Cuidado del Cabello como solución de Minoxidil en los folículos pilosos después de limpiar el cuero cabelludo, antes del tratamiento.

Microcurrent Peine del masaje

Hay luz roja y electrodos en el peine del masaje.

- ▶ Luz Roja de 600-700 nm generada puede aumentar el metabolismo celular, mejorar el sistema inmune del cuerpo;
- ▶ El Microcurrent generada por los electrodos puede acelerar el vaso abierto en el cuero cabelludo.



Hair regrowth & Anti-hair loss system

Menu

LED	WORK TIME	60	m
RED	ON TIME	10	S
YELLOW	ON TIME	1	S
BLUE	ON TIME	1	S

650nm laser	WORK TIME	60			
POWER	6				
ON TIME	10	S	OFF TIME	0	S

808nm laser	WORK TIME	60	m		
POWER	6				
ON TIME	10	S	OFF TIME	1	S

SINGLE

DOUBLE

EXTRA

SAVE

READY


BACK

Count: 1

Especificación

Name	Low Level Laser Hair Regrowth Machine
Laser output power	650nm diode laser 320mw 808nm IR laser 2200mw
LED output power	630nm Red cool light 1000mw 460nm Blue Cool light 1000mw 580nm Yellow Cool light 2000mw
Treatment Time	0-60min
Pulsing time range	1-10s
Pulsing Delay range	0-10s
Input power	200w
LCD Screen	8inch multi color touch screen
Device Dimension	1630*550*500 mm
Package Dimension	1650*580*580 mm
Rated input voltage	AC230 10%,50Hz 1Hz AC110V 10%,60Hz 1Hz (optional)

Procedimiento de Tratamiento

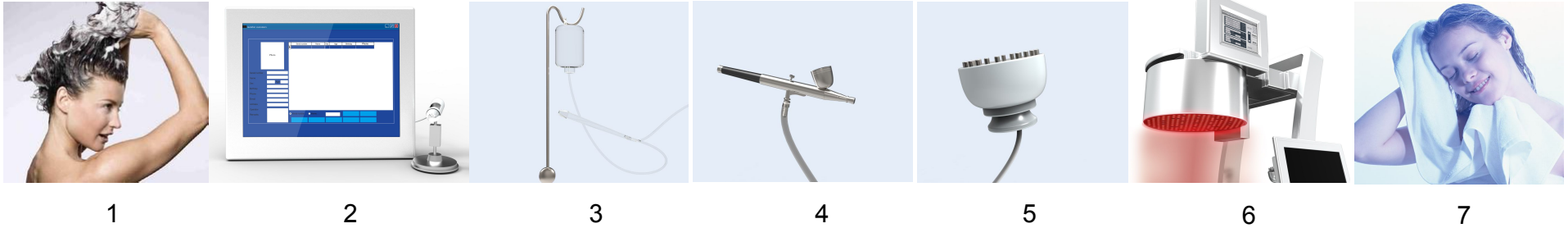

1. Lave el cabello y el cuero cabelludo. Si el paciente puede lavarse el pelo y el cuero cabelludo en la casa, que le ahorrará el tiempo de tratamiento.
2. Utilice el analizador de pelo para analizar la condición del cabello y el cuero cabelludo y guarde la fecha de los pacientes.
3. Utilice el lápiz de spray de oxígeno para limpiar el cuero cabelludo con suero.
4. Utilice la Medicina Sprayer para rociar loción de minoxidil en el área de tratamiento. Densidad de 5% para el hombre, un 3% para la mujer.
5. Para el cuero cabelludo puede absorber la loción mejor, use el peine del masaje Microcurrent para masajear el cuero cabelludo 5-8 minutos después de la pulverización de la loción de minoxidil.
6. A continuación, ponga el sistema en marcha, establezca la energía y el a tiempo de trabajo para comenzar a irradiar el cuero cabelludo. El tiempo de irradiación es de 30 minutos por 1 vez en una semana o 60 minutos por 1 vez cada dos semanas.
7. Después de acabar la irradiación, el paciente tiene que esperar 1 hora para lavar el cabello y limpiar la loción mioxidil.

Atención posterior al tratamiento

- Cada semana 1 tratamiento y 2-3 meses es una sesión.
- Se necesita 8-12 tratamientos para un curso.
- Después de 1 sesión, necesitará intervalo de 1 mes a iniciar otra sesión de acuerdo a la situación del paciente como de seguidores:
 - 1 Medida en cabello la pérdida de: La gravedad de la pérdida de cabello;
 - 2 Resultados de crecimiento del pelo: se espera el objetivo de alcanzar el tipo de efecto de pelo denso germinal, como área de pérdida de cabello, adelgazamiento del cabello y los folículos pilosos de nivel de latencia.
 - 3 El número de etapa germinal: de láser para instrumento germinal, el tratamiento de la alopecia seborreica es un tratamiento de escenario para el crecimiento del cabello, es más beneficioso y más científico y racional.

Nota: Para un mejor resultado de dispositivo de terapia de la pérdida de cabello, el paciente puede pulverizar o pintar el Minoxidil cada 2 días en casa, sólo 1 ml en la zona objetivo y el masaje 5-8 min. A la espera de 2 horas, luego lavar el cabello y limpiar el minoxidil.

Antes y Después

			
<p>Antes del tratamiento</p>	<p>2 Meses</p> <p>Nuevo crecimiento del pelo</p>	<p>3 Meses</p> <p>Más crecimiento del cabello y grosor</p>	<p>4 Meses</p> <p>Continuar a tener un nuevo crecimiento</p>

Indicaciones & Contraindicaciones

Indicaciones

- Terapia de la pérdida del cabello y el aumento de intensidad de cabello para hombres y mujeres
- La pérdida de cabello causada por endocrina fuerte
- La pérdida de cabello causada por patógenos y los nervios
- Pérdida de cabello después del parto
- La alopecia areata, y aumento la intensidad del cabello y el cuidado del cabello después de un trasplante de cabello.

Contraindicaciones

- Scalp trauma;
- Periodo menstrual, el embarazo, la lactancia de la mujer;
- Por no aceptar el tratamiento dentro de un mes después de la permanente;
- Enfermedades médicas generales, tales como: cáncer, enfermedades de la sangre, diabetes severa, hipertensión, enfermedades del corazón;
- Si usted tiene una enfermedad sistémica especial, informe a su médico antes de recibir tratamiento con sinceridad.