



TRSS

Manual de uso

PICOTECH

Pico segundo

ND: yag láser sistema de cuidado de la piel

Modelo N°: SP-1

PICOTECH

Pico segundo

ND:yag láser sistema de cuidado de la piel

Modelo N°: SP-1



Qué es el láser picosegundo?

El láser Picosegundo es la última tecnología de nueva generación para uso estético. A través de trillones de una energía láser de segundo y poderoso para moler el pigmento en el tejido de la piel para llegar al resultado de la eliminación del tatuaje y el pigmento en todo tipo de color de la piel.

A través de lentes fraccionadas especializadas, láser Picosegundo puede convertir la energía del láser en suave presión para crear un nuevo colágeno apretando las células y activando la célula natural sin quemar o dañar la piel.



Qué es el láser picosegundo?



- 1 532nm puede quitar el pigmento superficial en el área del ojo redondo, tal como marca de nacimiento, nevus de Ota, punto del café, tatuaje del color rojo y lesiones vasculares, topo del eritema.
- 2 585nm puede quitar el pigmento superficial en el área del ojo redondo, tal como marca de nacimiento, nevus de Ota, punto del café, tatuaje del color rojo y lesiones vasculares, topo del eritema. Más adecuado para el color de la piel oscura.
- 3 650nm puede quitar el tatuaje del color verde y el tatuaje azul del color.
- 4 1064nm puede quitar el pigmento de la capa dérmica en la cara y el cuerpo, tal marca de nacimiento, nevus de Ota, punto del café, tatuaje azul y negro del color.

Ventaja del láser picosegundo

Alta energía y duración del pulso corto :

El poder emite en trillones de segundo a los tejidos de la piel, lo que puede explotar el pigmento en pedazos mucho más pequeños que el láser tradicional Q: switch. Las piezas de pigmento pueden ser absorbidas más fácilmente y más rápidamente.

Mínimo riesgo y menos dolor

Dado que la duración del pulso se ha reducido miles de veces, menos daño de la piel se realiza. El tratamiento es más seguro y menos dolor.

No hay anestesia durante el tratamiento,
No hay inflamación.

Rápido :

Para la eliminación del tatuaje, por lo general 6-8 el tratamiento es necesario por Q:switch tradicional. Con el láser picosegundo, sólo 3-4 tratamiento para la eliminación completa.


Alto rendimiento

Completamente la eliminación de tatuajes y pigmentos se puede llegar con la tecnología de Picosegundo


Adecuado para el color de la piel de la piel tipo I-IV, sin hiperpigmentación después del tratamiento.

Picosegundo VS Q-Switch comparación de rendimiento

01

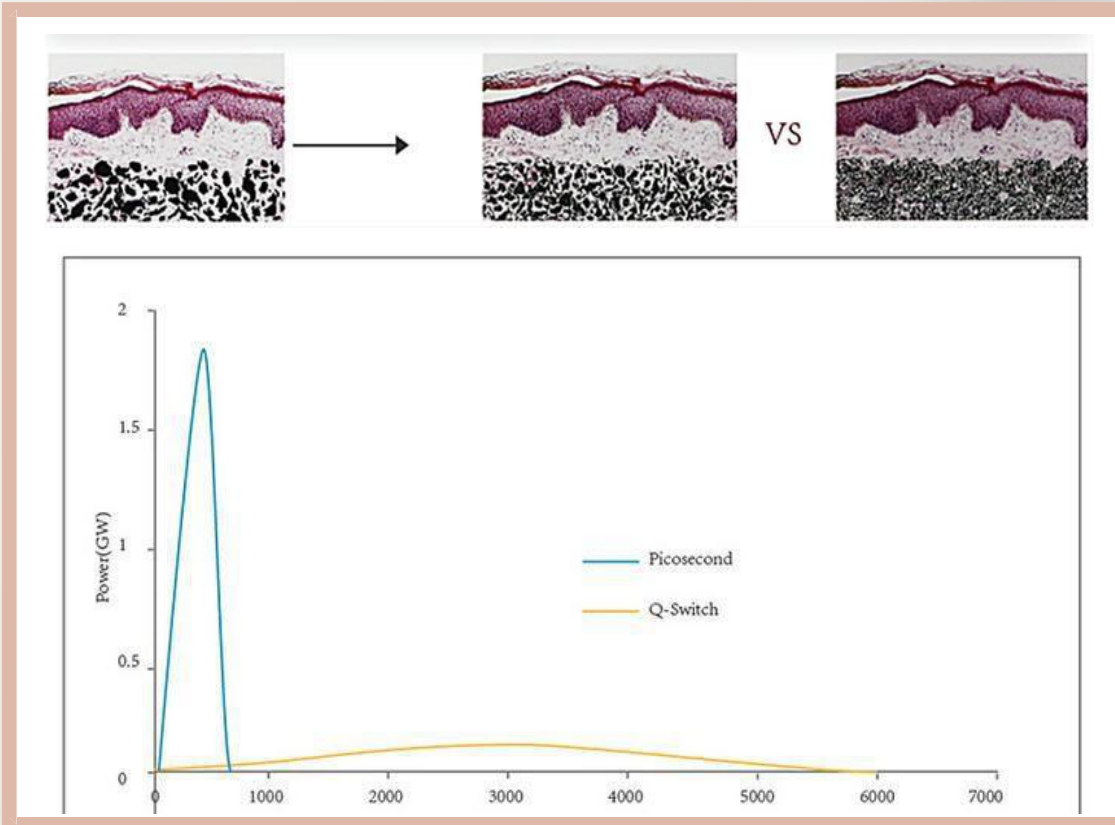

VS

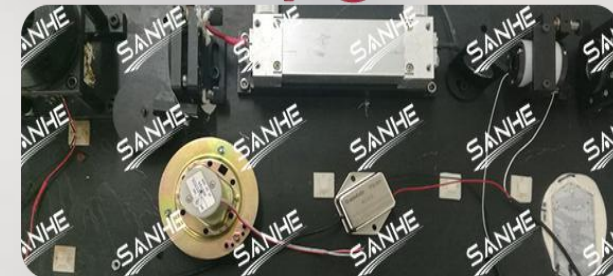

Rango de tratamiento :

01

Tatuaje corporal, tatuaje de cejas y línea de labios tattoo.

02

Pigmento de la epidermis y la dermis capa.

03

Nevus de Ota y marca de nacimiento.

04

Pecas, punto negro, manchas de la edad, manchas del café y Quemaduras de sol.

05

rejuvenecimiento de la piel, blanquear la piel y repavimentación.

06

Eliminación de la cicatriz del acné y eliminación del vaso sanguíneo

Especificación técnica


Equipo	Picosegundo laser
Pulso	Ancho de pulso controlado (2000ps)
Brazo	Con 7 articulaciones de Corea
Longitudes de onda de serie	1064nm / 532nm (desde software)
Longitudes de onda disponibles de forma opcional:	585nm y 650nm para colores verdes y amarillos
Frecuencia de disparo:	De 1 a 10 disparos por segundo
Lampara led:	Con conexión a lámpara led (opcional)
Energía de salida:	800 mj en pulso único y 1600 mj en pulso doble.
Tamaño de spot:	De 2 a 10mm mediante selector en el manípulo.
Modo trabajo:	Trabajo en continuo de 8 horas
Refrigeración:	Sistema de refrigeración por agua destilada, con radiadores y ventiladores.
Peso neto:	90*35*170CM 80kg
Medidas:	Paquete del transporte de 107*50*130CM,120KG

Q & A

Cuántos tratamientos son necesarios?

El número de tratamientos láser Picosegundo para la pigmentación no deseada variará dependiendo de la condición que se está tratando y cómo responde cada individuo.

Para quitar tatuaje, el tamaño, la localización y la densidad de la tinta desempeñan papeles importantes en cómo rápidamente la separación se puede alcanzar, pero 3-4 tratamientos es común para los tatuajes modernos.

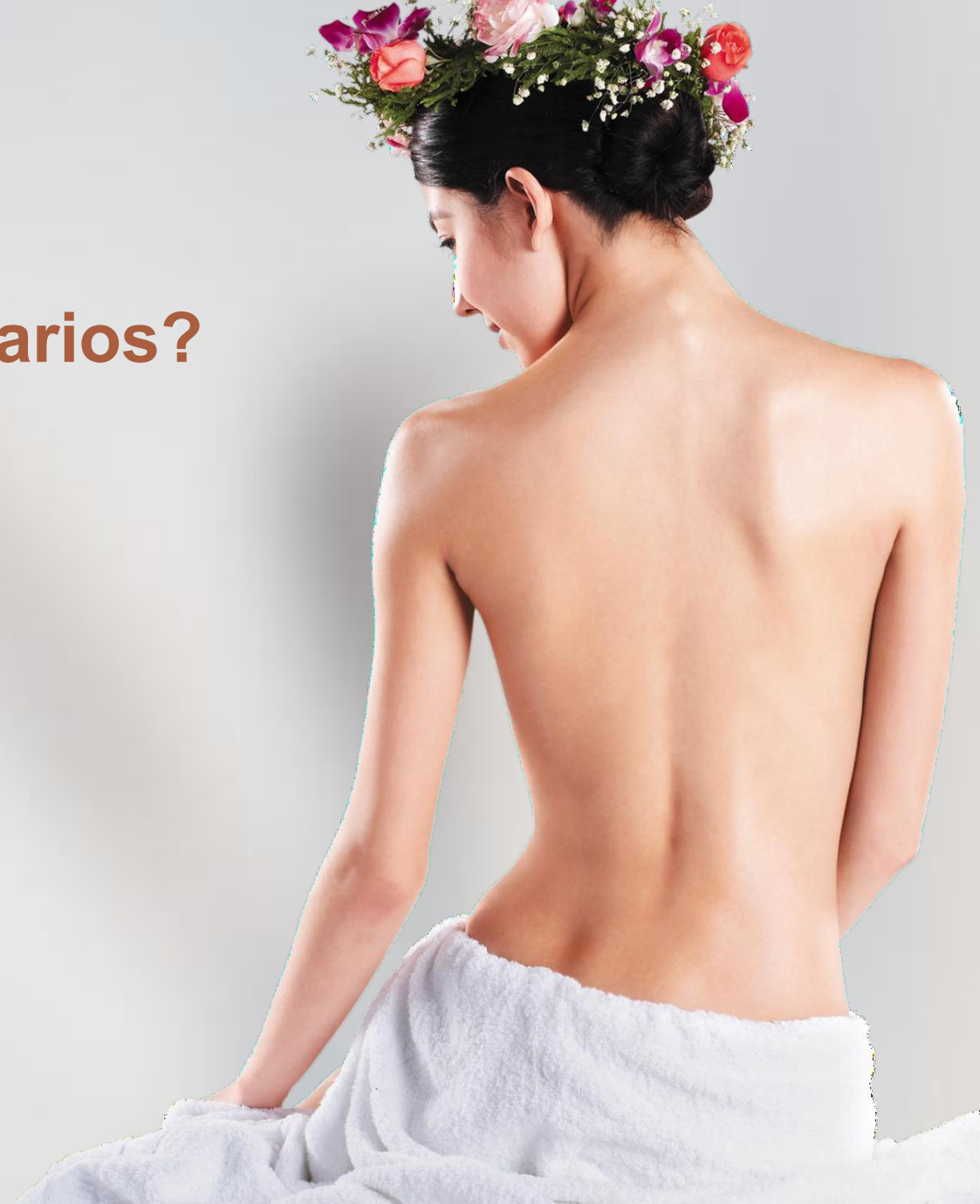

Cuánto dura el resultado?

La eliminación de tatuajes y los resultados de cicatrices de acné son permanentes. Los resultados del tratamiento del rejuvenecimiento de la piel son duraderos, pero algunas condiciones del pigmento se pueden recuperar.

Estará allí cicatrices?

El láser picosegundo está diseñado con seguridad, y las cicatrices son muy poco. Tratamientos de eliminación de tatuajes requieren mayor energía que el rejuvenecimiento de la piel y algunos pacientes pueden experimentar hipo pigmentación, pero esto suele ser temporal.



Qué es el tiempo de recuperación?

Los tiempos de recuperación dependen de la condición que se está tratando y de la capacidad de cada paciente para sanar. Los intervalos de tratamiento habituales son de 6 semanas para el tatuaje y la eliminación de 6-8 tatuajes. Tratamientos para las cicatrices del acné y el rejuvenecimiento de la piel usando la lente fraccional que se puede realizar cada 3-4 semanas.

Es seguro de láser Picosegundo?

Los pulsos ultrarrápidos del laser del picosegundo trabajan para reducir al mínimo la cantidad de calor que se transfiere. Menos calor significa menos daño a la piel circundante y menos riesgo de daño



Tengo que evitar el sol después del tratamiento?

Después de los tratamientos con láser para la eliminación de los tatuajes y el pigmento inesperado, la piel es más fácilmente dañada por la luz solar. Se recomienda minimizar la exposición al sol y el uso de protector solar SPF30 +.

Cuánto dura el procedimiento?

Depende del tamaño de la zona a tratar, y 10 minutos es común para los tratamientos de tamaño mediano tatuaje y rejuvenecimiento de la piel.






Qué se siente el láser picosegundo?

La mayoría de la gente experimenta muy poco malestar y describe tratamientos del rejuvenecimiento de la piel como sensación como el chasquido de una goma. Debido a que los tratamientos de eliminación de tatuajes utilizan más energía, los pacientes pueden experimentar más molestias, pero su proveedor de tratamiento debe ser capaz de ofrecer crema anestésica u otras ayudas para minimizar la incomodidad.



Lista de Accesorios

01

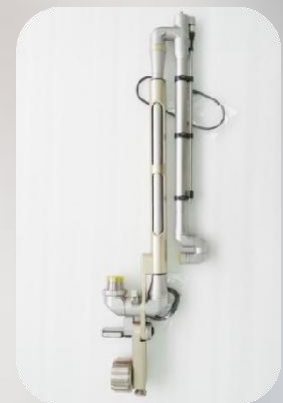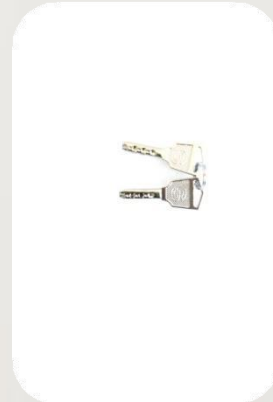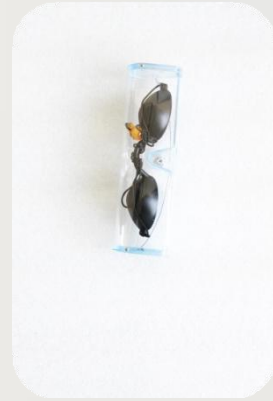

OPCIONAL

01



Celular



585nm




650nm



Lente de enfoque



Interfaz amigable

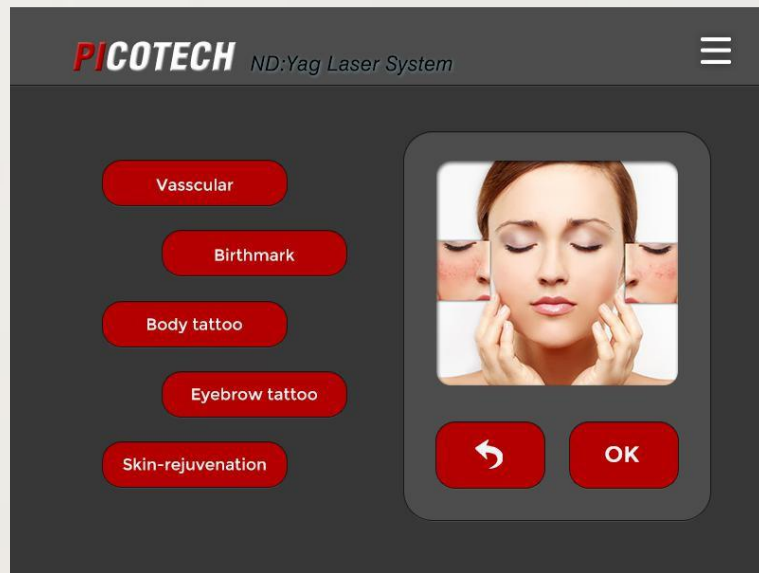

Partes del cuerpo modelo



Ajuste de parámetro Modelo

Antes & después

