



TRSS

Manual de uso

**Velashape sistema**

**+RF Rodillo**




# Velashape sistema +RF Rodillo

---



# Principio de tratamiento

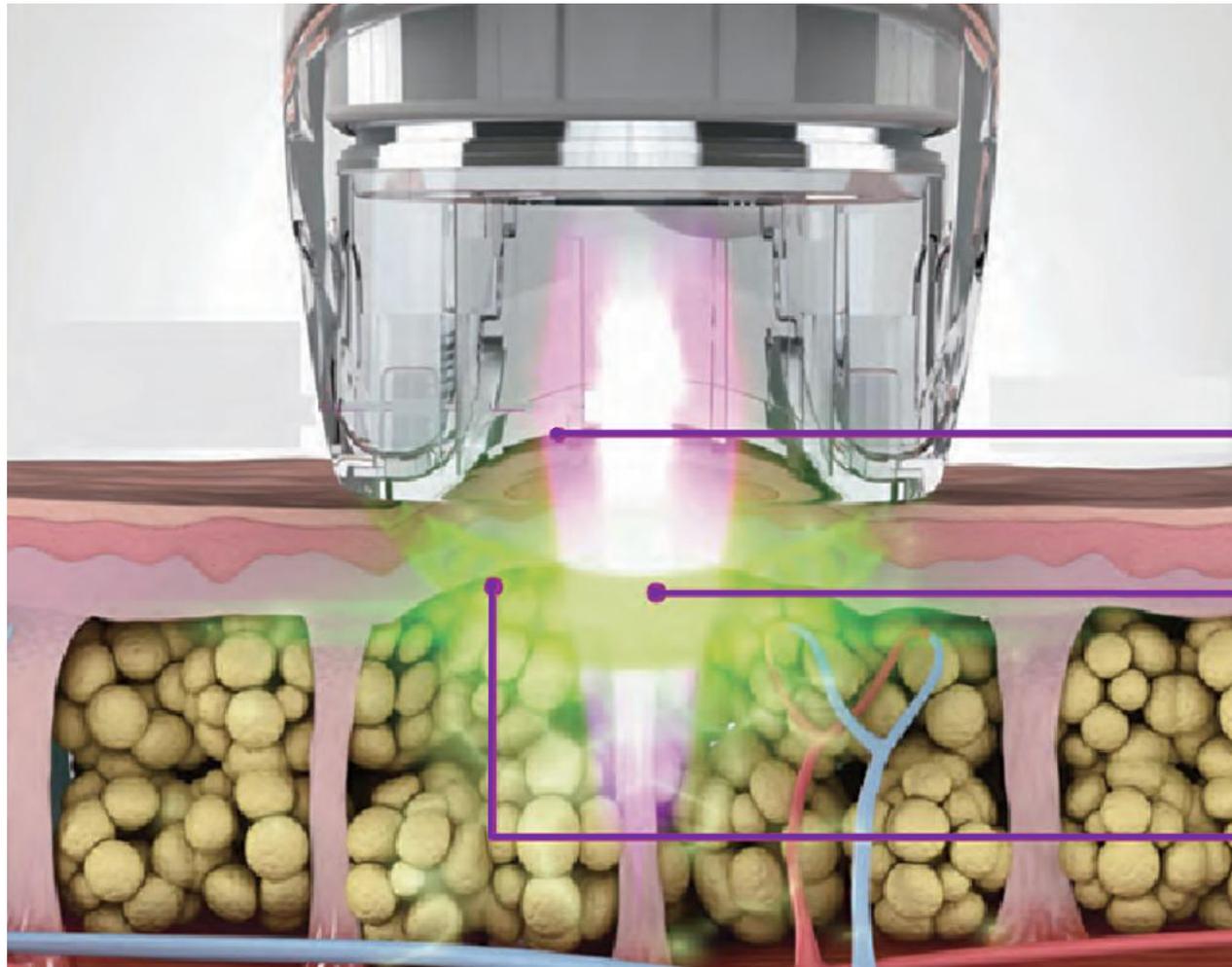

Un vacío eleva el tejido objetivo, acercándolo a la barrera de energía.

La luz infrarroja (IR) calienta directamente el área objetivo.


La seguridad de la energía de radiofrecuencia (RF) bipolar guía el calor de manera uniforme por toda el área objetivo, de modo que se calienta más rápido sin dañar la piel.

# Rango del tratamiento

- **Contorno corporal**
  - **Eliminación de arrugas**
  - **Eliminación de celulitis**
  - **Levantamiento facial**
- 
- **Adelgazamiento corporal**
  - **Estiramiento de la piel**
  - **Textura y tono de la piel**
  - **Reducción de la circunferencia**



# Antes & después

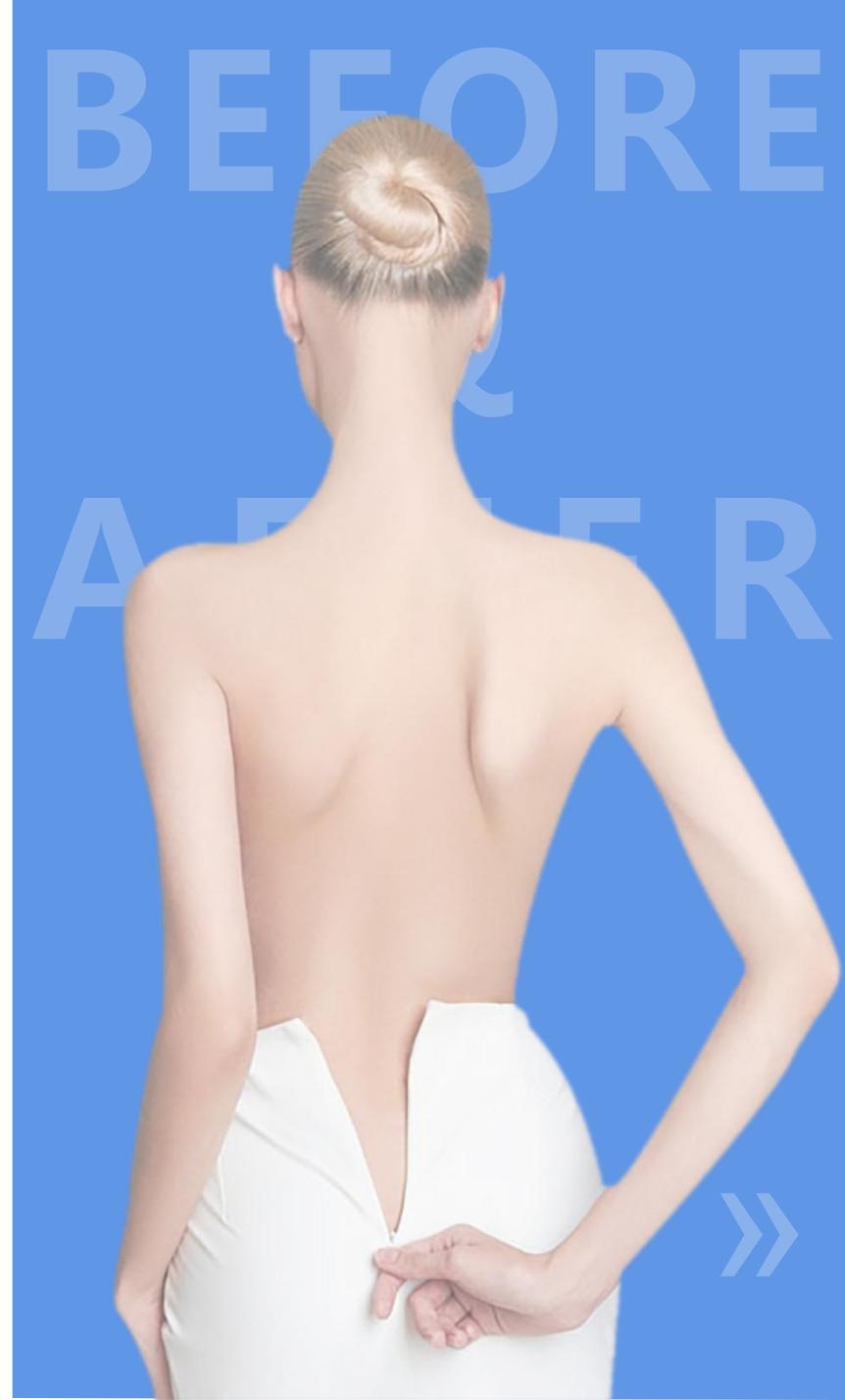

A close-up photograph of a person's hand, showing the skin texture and several small, dimpled indentations characteristic of cellulite. The hand is positioned in the lower-left quadrant of the frame, with fingers slightly curled. The background is a soft, out-of-focus light blue and white.

## Que es la celulitis?


La celulitis es un cambio estructural de la piel que ocurre en la mayoría de las mujeres pospúberes, ya sean delgadas o con sobrepeso.

Se presenta como una modificación de la morfología de la piel evidente por la formación de hoyuelos y la nodularidad de la piel que ocurre principalmente en mujeres en la región pélvica, las extremidades inferiores y el abdomen, y es causada por la hernia de grasa subcutánea dentro del tejido conectivo fibroso, lo que lleva a un acolchado o apariencia de piel de naranja.

La celulitis puede ocurrir en mujeres de todas las edades y tiende a volverse más visible con la edad.

Con el tiempo, la piel pierde su grosor y, por lo tanto, aumenta la visibilidad de las antiestéticas protuberancias de celulitis.

# ¿Cómo funciona el rodillo de vacío de RF infrarrojo para ayudar a eliminar la celulitis?

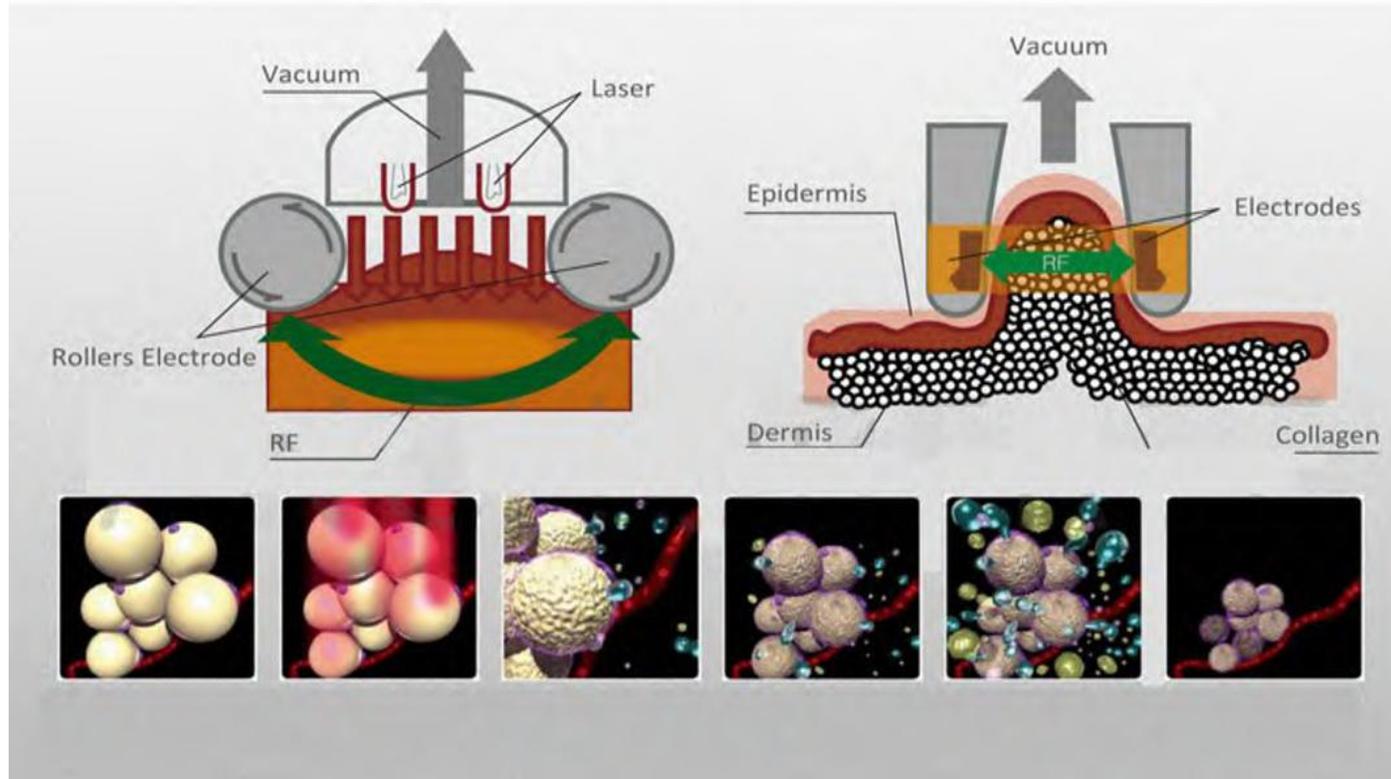

El rodillo de vacío de RF infrarrojo combina cuatro tecnologías diferentes, que incluyen IR (infrarrojos), RF BiPolar (radiofrecuencia) y manipulación mecánica de tejidos mediante el uso de rodillos de masaje y vacío pulsado.

La combinación de las tecnologías IR y RF acopladas al vacío provoca un calentamiento profundo del tejido conectivo, incluidos los tabiques fibrosos, que a su vez promueve un aumento en el depósito de colágeno y el metabolismo celular local, lo que resulta en una reducción localizada de la laxitud y el volumen de la piel. La manipulación mecánica adicional del tejido de la Vela provoca un aumento inmediato de la circulación y el drenaje linfático, ambos componentes esenciales para la estructura sana de la piel.

# Ventajas

Conductor comercial rentable alta demanda de pacientes para tratamientos de contorno corporal y celulitis Agregue más pacientes a su consultorio con sesiones de tratamiento cortas

Excelentes resultados en solo 1-3 sesiones Experiencia de usuario mejorada con el nuevo software de modo guiado

Sesiones de tratamiento cortas y resultados sobresalientes, desde tan solo una sesión Cero tiempo de inactividad y poca o ninguna molestia Alta satisfacción del paciente

## 5 tecnologías en una máquina


*Vacuum*  
+  
*Láser de infrarrojo cercano*  
*de 940 nm*  
+  
*RF bipolar*  
+  
*Cavitación*  
+  
*rodillos mecánicos*





# Tres piezas de mano de tratamiento diferentes para el tratamiento de todo el cuerpo



**Manípulo grande: para abdomen, flanco, glúteos, área de tratamiento del muslo.**

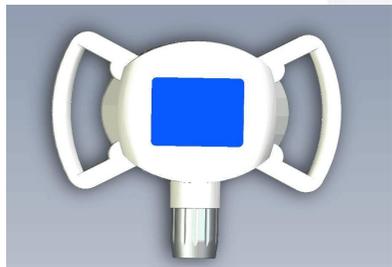

**Para dar forma a masajes de todo el cuerpo**

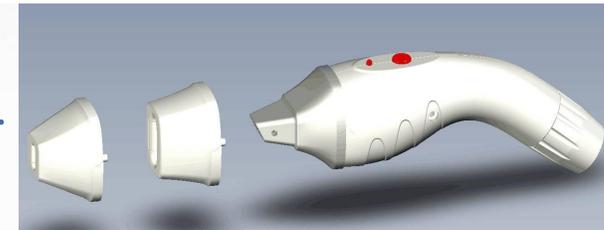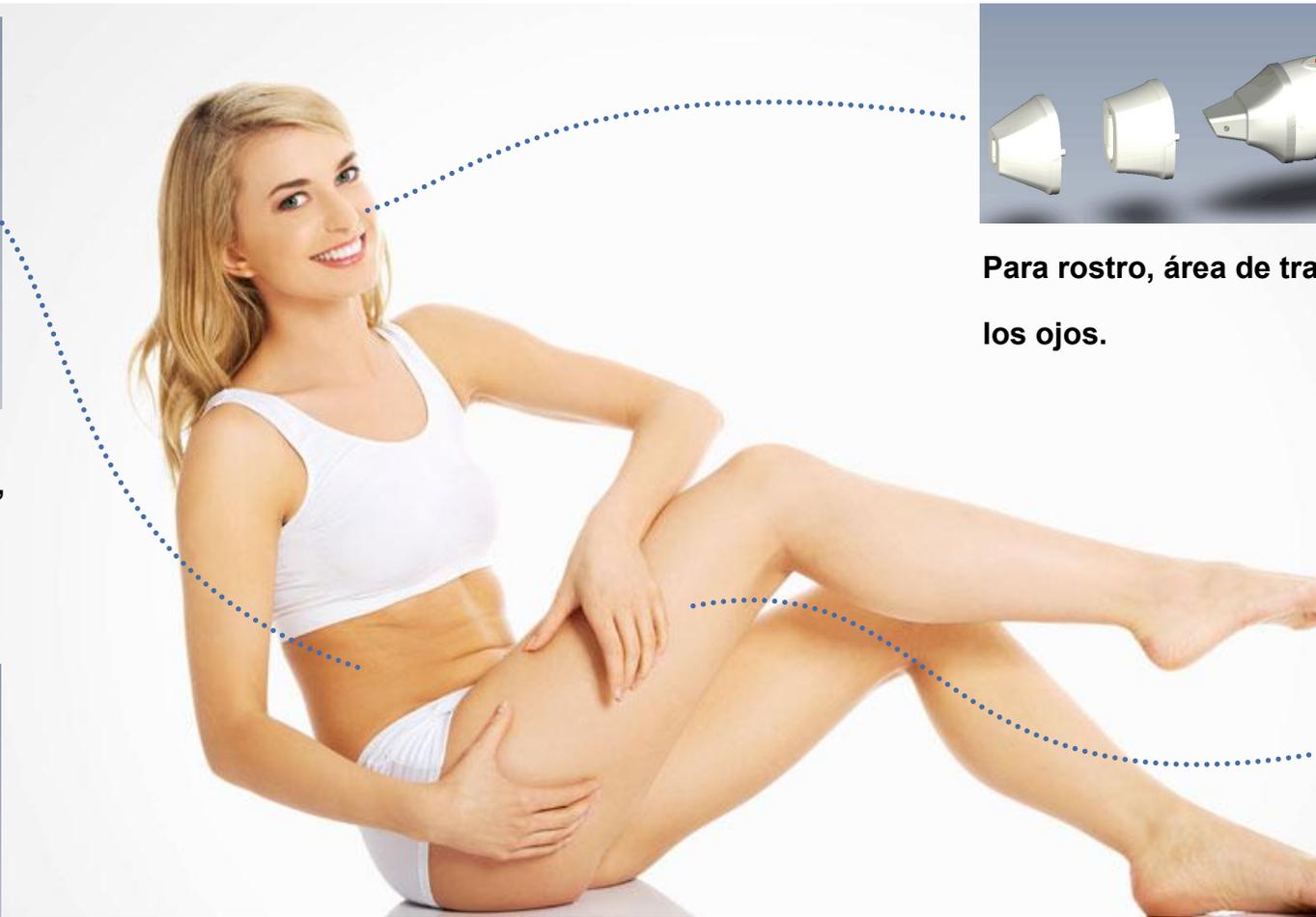

**Para rostro, área de tratamiento alrededor de los ojos.**



**Manípulo central: para brazo, pierna, espalda, área de tratamiento del cuello.**


# Tres piezas de mano de tratamiento diferentes para el tratamiento de todo el cuerpo




**Manípulo grande:** para abdomen, flanco, glúteos, zona de tratamiento de muslos.



**Manípulo media:** Para brazo, pierna, espalda, Área de tratamiento de cuello.

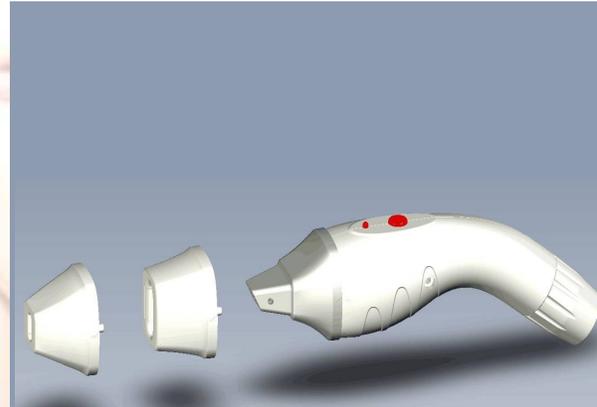

Para la cara, Área de tratamiento alrededor de los ojos.

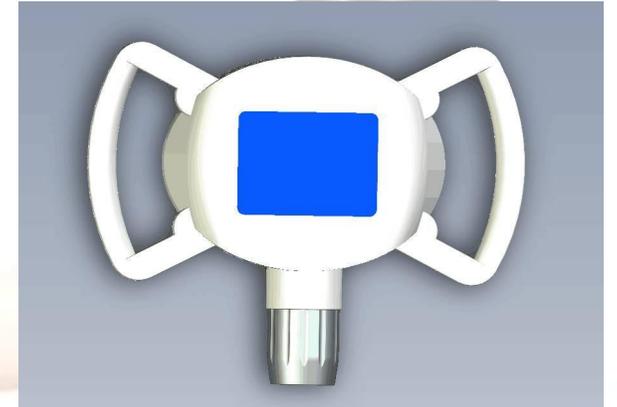

Para dar forma a masajes de todo el cuerpo



## Especificación

<b>pantalla</b>	<b>12 inch pantalla tácil</b>
Modo operativo	pulso
longitud de onda láser	940nm
Manípulos	4 manípulos 123mm*88mm;66*40mm;43*30mm; 17*10mm;14*9mm; 10*4mm(solo para la cara)
Velocidad del rodillo	0-36r/m
RF frecuencia	1MHZ
Cavitacion frecuencia	40 KHZ
La intensidad de Vacuum	30-85(kpa)
Voltaje	AC220V ± 10%, 10A50Hz/AC110V ± 10%, 60 Hz

# POR QUÉ ELEGIRNOS



## AUMENTAR LA DEMANDA

Mayor demanda de  
tratamientos no invasivos



## MANTÉNGASE A LA PARTE DEL MERCADO

Mantenerse a la vanguardia del mercado con los  
últimos tratamientos de modelado corporal para  
hombres y mujeres



## GARANTÍA

2 años de garantía (excepto consumibles), con  
servicio gratuito de por vida.



## CAPACITACIÓN

Manual de usuario, vídeo de funcionamiento y  
formación online a través de webcam gratis



## CERTIFICACION DE TREN

Capacitación y Certificación Completa  
para 4 personas valorada en \$ 1500



## APOYO

Equipo de servicio profesional con servicio  
en línea las 24 horas (soporte telefónico)



## FABRICANTE PROFESIONAL


Más de 10 años de experiencia



## TU PROPIA MARCA

Coloque su logotipo en la máquina y en la  
pantalla si es necesario.

# UI Interfaz

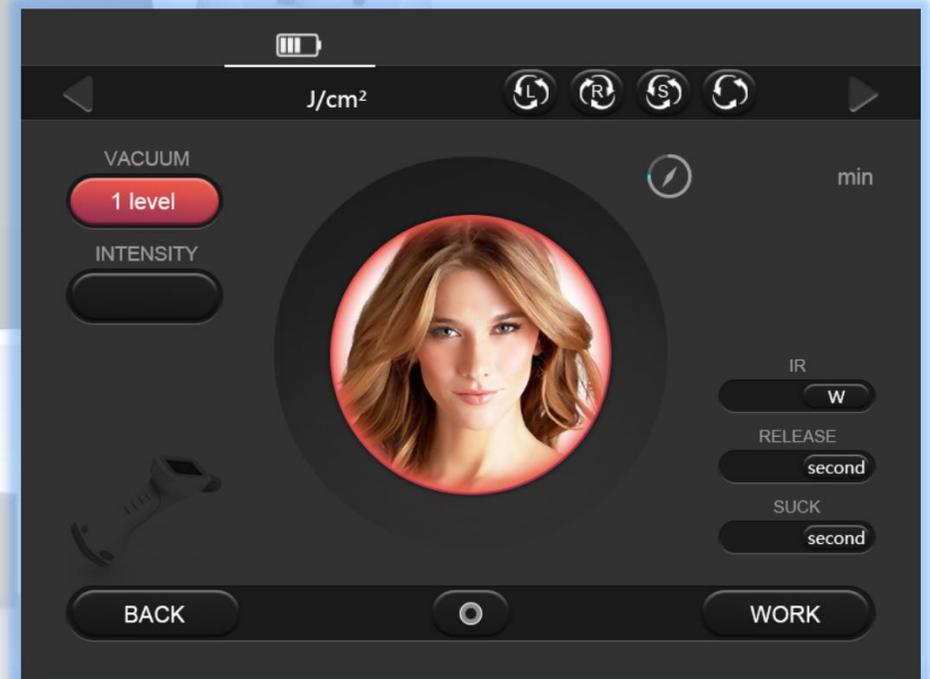

## ¿Quién sería un candidato ideal para este tratamiento?

El tratamiento se recomienda para pacientes normales a con sobrepeso que padecen celulitis antiestética en la región pélvica, alrededor de las caderas, abdomen o miembros inferiores. Para obtener resultados optimizados, estos pacientes también deben comprometerse a mantener un estilo de vida saludable. El médico tratante tiene la determinación final para elegir a los mejores candidatos para el tratamiento.

## ¿Cuántos tratamientos se necesitan?

Para el cuerpo y las extremidades, 8-10 tratamientos por sesión, cada 4-5 días para un tratamiento, 30 minutos cada tratamiento.

Para el rostro, 10 tratamientos una sesión, una vez a la semana, 15-20 minutos cada tratamiento.

Para las arrugas de los ojos, 10 tratamientos una sesión, una vez a la semana, 15 minutos cada tratamiento.

## ¿Cuánto durarán los resultados?

Recomendamos 10 tratamientos como sesión, habrá mejoras de manera diferente después de cada tratamiento. Los resultados pueden durar hasta unos años dependiendo de la edad, el estilo de vida y los cambios hormonales, se recomiendan sesiones de mantenimiento para extender el efecto de los resultados, recomendamos una vez al mes después de que se hayan obtenido los resultados deseados. Se reducirán 1-5cm en muslos, 2-6cm en abdomen y cinturas.

## ¿Cómo es el procedimiento de tratamiento?

Recomendamos 10 tratamientos como sesión, habrá mejoras de manera diferente después de cada tratamiento. Los resultados pueden durar hasta unos años dependiendo de la edad, el estilo de vida y los cambios hormonales, se recomiendan sesiones de mantenimiento para extender el efecto de los resultados, recomendamos una vez al mes después de que se hayan obtenido los resultados deseados. Se reducirán 1-5cm en muslos, 2-6cm en abdomen y cinturas.





## ¿Qué pasará después del tratamiento?

Aumentará la producción de orina.  
sentir calor durante 30 minutos a una hora.

## ¿Qué se debe notar después del tratamiento?

Evite los baños de sol y los tratamientos de bronceado..

## ¿Quién puede operar esta máquina?

Cualquier operador capacitado puede usarlo.

## Aplicaciones

Lifting de cuello, lifting facial, mejora de patas de gallo, ojeras, ojeras, etc.  
Reducción de celulitis para brazos, piernas, espalda, cinturas, abdomen.  
Modelado corporal después del parto.  
Reducción de estrías gravídicas.

## ¿Cuáles son las contraindicaciones?

No existen contraindicaciones importantes para el tratamiento. Para pacientes con marcapasos / desfibrilador, embarazadas o en período de lactancia o con problemas de salud graves, se recomienda consultar a su médico antes de comenzar el tratamiento.