



TRSS



*"Profesionales en
belleza, terapia
regenerativa
y antiedad".*

SALUD
BELLEZA



*Nuestro objetivo es ofrecer
salud y belleza.*

Catálogo

<hr/>	
Picosegundo láser	P02
Nd Yag Láser	P04
Nd Yag Láser	P06
980nm láser	P08
Máquina de enfriamiento	P10
Dermoabrasión SkinPro-1	P12
<hr/>	
808nm diodo laser	P14
P-MIX láser triple onda	P16
IPL+SHR+Elight	P18
<hr/>	
CO2 láser fraccional	P20
RF fraccionada con microaguja	P22
Hifu facial y corporal	P24
Máquina Capilar Láser	P26
<hr/>	
Magshape ondas electromagnéticas	P28
Portable ondas electromagnéticas	P30
Velashape	P32
Criolipolisis adelgazamiento corporal	P34
Salushape reducción grasas	P36



Picosegundo láser

Eliminación de tatuajes, eliminación de cloasma, Rejuvenecimiento.



Eliminar Cloasma



Eliminar Tatuajes



Nevo de ota Blue Mole, etc



Eliminar Manchas



650nm, 585nm, Celular, Lente de enfoque



La energía se puede mostrar durante el tratamiento por los datos línea.



Pulso simple y pulso doble para tratamiento diferente.

PARAMETRO: PICOSEGUNDO LASER	
Energía	Max 500 MJ (532nm), Max 800mJ (1064nm)
Longitud de onda	1064nm, 532nm (650nm and 585nm optional)
Ancho de pulso	500ps or 350ps
Frecuencia	1 - 10Hz
Tamaño de punto	2-10mm
Dimensión	90x45x70cm
Peso	113kg





VENTAJAS TÉCNICAS

- Pulso corto:** 500ps o 350ps pueden destruir la pigmentación durante muy poco tiempo.
- Alta frecuencia:** 1-10HZ de alta frecuencia puede ahorrar tiempo de tratamiento.
- Alta precisión:** El tamaño del punto ajustable de 2-10 mm.
- Corea importó:** 7 brazos articulado importado de Corea

TEORIA DEL TRATAMIENTO

El mundo de la estética láser ha inventado un nuevo láser con un ancho de pulso corto de hasta a picosegundo (una billonésima de segundo). El ancho de pulso ultra-disparo en la piel producir el mejor efecto, muy poco calor, más tratamiento de seguridad. Es más eficaz que el nd yag normal láser para eliminar la pigmentación, piel rejuvenecimiento y eliminación de tatuajes.

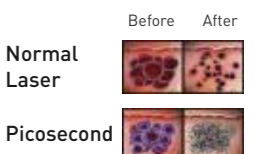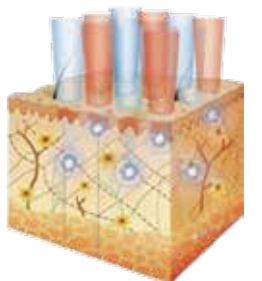



ND YAG láser

Eliminación de tatuajes, eliminación de pigmentación, rejuvenecimiento de la piel.



Eliminar Pigmentación



Eliminar Tatuajes



Rejuvenecimiento



Eliminar Manchas



Corea importó 7 brazos articulaciones asegurar energía estable.

Tamaño de punto de 2-10 mm para diferentes zona de cuerpo.

Dentro de Estados Unidos colocado Lente lamda para mejor resultado.



La energía se puede mostrar durante el tratamiento mediante la línea de datos.

Pulso único y doble pulso para diferentes tratamientos.

PARAMETRO:ND YAG LASER	
Longitud de onda	1064nm, 532nm
Energía	Double 1064nm: 100-2500mj; 532nm:1200mj Single 1064nm: 100-1500mj; 532nm:800mj
Ancho de pulso	8±2ns
Frecuencia	1-10HZ
Tamaño de punto	2-10mm
Haz de guía de luz	650nm Láser rojo
Sistema de refrigeración	Intercambiador de calor de agua a aire de ciclo cerrado
Entrega de láser	Corea importó 7 brazo articulaciones
Sistema de control	Pantalla táctil a color TFT de 10,4 pulgadas
Requisitos de energía	220V,10A,50/60Hz; 110v,10A, 50/60Hz
Dimensión	680mmx 400mmx820mm
Peso	75kg
Nota	Los datos técnicos cambiados no informarán especialmente



VENTAJAS TÉCNICAS

Corea importó: 7 brazos articulado importado de Corea.

Alta potencia: Onda cuadrada superior plana de alta potencia fuente de alimentación.

Multi-pulso: Pulso simple y doble, con 2500mj energía alta.

Detección inteligente: Sistema de detección inteligente de densidad de energía.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

Eliminar pigmentacion

Pigmentaciones se calientan y se exponen cuando se aplica láser.

Pigmentaciones se expanden y agrietan.

Pigmentaciones se eliminan finalmente.





ND YAG láser

Eliminación de tatuajes, eliminación de pigmentación, Rejuvenecimiento.



Eliminar
Pigmentación



Eliminar
Tatuajes



Rejuvenecimiento



Eliminar
Manchas



532NM
rojo, naranja, marrón



1064NM
Negro, azul



cabezal carbón peel

PARAMETER: ND YAG LASER	
Salida potencia	600W
Laser potencia	300W
Sistema de salida	Laser cabezal
Longitud de onda	1064nm, 532nm
Cabezal	1064nm 532nm y Carbon peeling cabezal
Ancho de pulso	532nm:4ns 1064nm:4.5ns
Energía	100-2000mj
Tamaño de punto	Djuste de distancia
Frecuencia	1-10HZ
Refrigeración	Agua destilada
Sistema de control	Pantalla táctil a color TFT de 10,4 pulgadas
Sistema de refrigeración	Aire+ Agua
Requisitos de energía	85-115V+20%, 60Hz /200-230V+20%, 50Hz
Maquina peso	30KG
Tamaño de la maquina	650*500*450mm
Metal caja peso	45kg
Tamaño de metal caja	940*600*620mm



VENTAJAS TÉCNICAS

Ancho de pulso corto: El ancho de pulso 4ns puede hacer el tratamiento Efectivamente.

Alta potencia: 2000mj de alta potencia rompen el pigmentación en pequeños trozos.

Alta frecuencia: 1-10 HZ de alta frecuencia ahorrar tiempo de tratamiento.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

Utilizando el efecto explosivo del láser Nd: YAG, el láser penetra la epidermis en la dermis que incluye la cantidad de masa de pigmento. Dado que el láser pulsos en nanosegundos pero con super alta energía, La masa de pigmento inyectado se hincha rápidamente y se rompe en pequeños piezas, que se eliminarán a través de metabolismo sistema.



980nm Láser

Eliminación de enrojecimiento, eliminación vascular.



Vasculares



Hongos de las uñas



Cabezal de tratamiento láser de diodo de fibra de 980nm



La energía se puede ajustar de 1 a 3 niveles.
Puede abrir o cerrar la luz guía y la voz.
El tiempo de pulso y duración se puede ajustar.

PARÁMETRO: 980NM LÁSER	
Longitud de onda	láser de 980 nm
Patalla	pantalla táctil a color de 17 pulgadas
Potencia	50W
Ancho de pulso	20ms-100ms
Duración de pulso	0, 180ms-900ms
Refrigeración	Aire
Dimensión de la máquina	400 mm (W) * 320 mm (L) * 350 mm (H)
Dimensión del paquete	525 mm (W) * 445 mm (L) * 465 mm (H)
Eléctrico	CA 220V ± 10% 50HZ / CA 110V ± 10% 50HZ/110V




VENTAJAS TÉCNICAS

- Profesional** El diodo de 980 nm es más útil para vascular.
- Cabezal de tratamiento** Se pueden elegir cabezales de 1 mm, 2 mm, 3 mm.
- Pulso corto** El ancho de pulso ajustable de 20-100ms garantiza un tratamiento eficaz.
- Alta potencia** 50W de alta potencia para mejor resultado.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

El láser de 980 nm es el espectro de absorción óptimo de la porfirina células vasculares. Las células vasculares absorben el láser de alta energía de Longitud de onda de 980 nm, se produce la solidificación y finalmente se disipa.

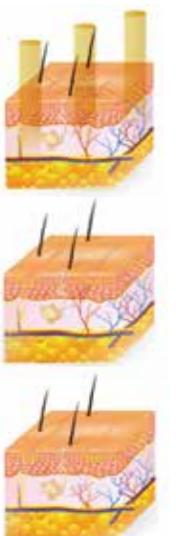



Maquina De Enfriamiento

Cómodo, Mejor compañero, Alivia el dolor.



Alivia el dolor



Skin Cooling



Láser compañero



Adaptador redondo



Medio Adaptador cuadrado



Grande Adaptador cuadrado

PARÁMETRO:MAQUINA DE ENFRIAMIENTO	
Producto	Máquina ICool Cold Air
Sistema de control	Pantalla táctil a color de 5,2 pulgadas
Potencia	1000W
Rango de temperatura	-4 C ~ -30 C
Velocidad del viento	1- 6 degree
Tiempo de descongelación	15S
Requisitos de energía	110V, 50hz, 3A, 220V, 50hz, 3A
Peso	62kg
Tamaño de la máquina con plataforma	810X400X1400mm
Tamaño de la máquina sin plataforma	810X400X845mm
Tamaño del paquete	915X515X1050mm



VENTAJAS TÉCNICAS


Super enfriamiento: -4 C ~ -30 C Ajustable

Velocidad del viento: Nivel 6 ajustable

Inteligente: 15S Tiempo de descongelamiento automático.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

Después de insertar el conjunto del conector, podría funcionar con la máquina 808nm diodo láser, co2 láser fraccional, luz pulsada, y Nd-yag láser... Adecuado para todas las máquinas si los pacientes sienten dolor y necesitan un procedimiento de enfriamiento.

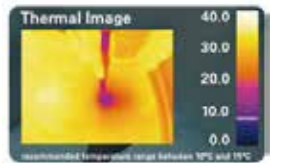



Dermoabrasion SkinPro-1




Limpieza profunda



Reduce los poros



Quita puntos negros

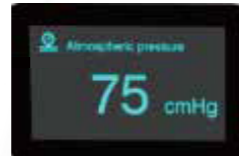

Puede ver la presión de vacío en esta pantalla.

PARÁMETRO:DERMOABRACION SKINPRO-1	
Rated voltage	AC220V±20%, 50Hz AC110V±20%, 60Hz
Machine size	35*29*40cm
Handpieces	1.Liquiddermabrasion handle with 8 tips 2.Multipolar RF head
Machine weight	7.5KG
Package dimensions	44*37*51cm
Total package weight	10KG
Machine name	SkinPro-1
Rated power	110W
Micro-current power	10W
Vacuum pressure	0-75Kpa
Machine material	ABS



VENTAJAS TÉCNICAS

Indolor : Sin sangre, limpieza profunda.

Limpieza : 8 cabezales de tratamiento absorben

Multifuncional : También tiene el manípulo RF para rejuvenecimiento de piel y micro dermoabrasión

TEORIA DEL TRATAMIENTO

Máquina SkinPro, combinada con adsorción, en ausencia de dolor, la parte del embudo del folículo piloso se puede abrir y eliminar la cutina. cutina del desecho metabólico, a la vez que proporciona nutrientes adecuados y duraderos para la piel. Es un procedimiento de enfermería esencial antes del instrumento fotoeléctrico operación.





808NM Diodo láser



Depilación



Tratamiento indoloro



Todo tipo de piel



2000W de alta potencia
-16 °C Enfriamiento fuerte
Disparos ilimitados



Modo normal, Modo rápido
Fácil operación.



Puede salvar 5 grupos
parámetros recomendados.



PARÁMETRO: 808NM LÁSER DE DIODO	
Tipo de láser	Sistema de depilación láser de diodo de alta potencia
Longitud de onda	808nm
Potencia del láser	2000 W
Frecuencia	1-20 HZ
duración del pulso	10 ms ~ 100 ms
Fluencia	10 ~ 80J / cm2
Tamaño del punto	12 mm * 23 mm
Vida útil del cabezal de tratamiento	sin limitación de disparos
Temperatura de cabezal	-16 °C
Refrigeración por contacto	refrigeración por contacto de zafiro puro
Pantalla	pantalla táctil multicolor de 10 pulgadas
Fuente de alimentación	CA 220 V / 50-60 Hz (CA 110 V opcional)



VENTAJAS TÉCNICAS

- Alta potencia:** El manipulador de 2000 W garantiza un mejor resultado.
- Corta duración:** 10-100 ms de corta duración.
- Larga vida:** Disparos ilimitados
- Fuerte enfriamiento:** Agua+aire+semiconductor

TEORIA DEL TRATAMIENTO

Usando la teoría de absorción de láser selectiva puede ser absorbida preferentemente por calentamiento de la tallo del pelo y del folículo piloso, por otra parte para destruir el folículo del pelo y la organización de oxígeno alrededor del folículo piloso.





P-MIX Láser Triple Onda



Alta potencia



Corte ancho de pulso



Sin limitación de disparos



2000W de alta potencia
-16 °C Enfriamiento fuerte
Disparos ilimitados
808nm+755nm+1064nm



Modo rápido, modo normal.



PARÁMETRO: P-MIX LÁSER TRIPLE ONDA	
Tipo de láser	Sistema de depilación láser de diodo de alta potencia
Potencia del mango	1200W/2000W
Potencia de máquina	3000W/4000W
Longitud de onda	755nm, 808nm, 1064nm
Vida útil del cabezal de tratamiento	sin limitación de disparos
Fluencia	10 - 80J / cm ²
Duración del pulso	10 ms - 100 ms
Tamaño del punto	12mm*12mm/ 12 mm * 23 mm
Frecuencia	1-10HZ/ 1-20 HZ
Sistema de refrigeración	Max -16 °C
Cooling System	Sistema de refrigeración de temperatura constante de 25 grados
Pantalla	pantalla multicolor de 10,4 pulgadas
Tamaño del paquete	82 * 55 * 120 CM
Peso bruto	82KG

P16



VENTAJAS TÉCNICAS

Alta potencia: 2000W

3 Longitud de onda: 755nm + 808nm + 1064nm.

Larga vida: No hay limitadas de disparos

Duración corta: 10-100ms.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

Durante el tratamiento de depilación láser, la luz pasa a través de la piel y es absorbida por la melanina en el tallo del cabello. Esta absorción eleva la temperatura del folículo piloso y destruye térmicamente las células responsables del crecimiento.

3 longitudes de onda pueden hacer todo tipo de piel.



P17



IPL+SHR+Elight



Depilación



Eliminación de acné



Rejuvenecimiento de piel



Eliminación de pigmentación



Un manípulo para depilación y otro para rejuvenecimiento de piel



El manípulo usa Zafiro



3 sistemas combinados en 1 máquina. Energía, frecuencia que se puede ajustar por pantalla.

PARÁMETRO: IPL SHR ELIGHT	
Longitud de onda	HR: 650-950nm SR: 560-950nm
Cabezal de tratamiento	Optional: (VR 420-950nm) PR: (530-950nm AR:500-950nm)
Fluencia	IPL y E-light: 10-50J / cm2 SHR: 1-10J / cm2
Frecuencia	IPL y E-light: $\leq 0.5\text{HZ}$ SHR: 1-8HZ SSR: 1-3HZ
Potencia de RF	1-30 W
Potencia de entrada	3000W
Cristal de contacto	Zafiro puro
Lámpara	Lámpara importada de Reino Unido.
Tamaño del punto	10*40 mm para [SR, VR, AR, PR] 15 * 50 mm para HR
Temperatura de enfriamiento de cabezal	Max -10C
Sistema de refrigeración	Refrigeración por agua integrada + refrigeración por semiconductores + refrigeración por aire
Pantalla LCD	Control de pantalla táctil de color verdadero de 10,4 pulgadas
Peso	65kg



VENTAJAS TÉCNICAS

3 en 1:

Combina IPL, Elight y SHR en una máquina.

Lámpara importada:

se importada por Reino unido. La energía es más estable.

Larga vida:


1 millón del disparo.

Multifuncional:

Depilación, rejuvenecimiento de piel.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

SHR es una tecnología revolucionaria para el tratamiento del retiro del pelo de IPL. IPL tradicional trata su piel con grandes cantidades de Julios (energía), SHR-950S tira disparos a ráfaga, pero en bajas cantidades de Julios. Modo SHR calienta suavemente los folículos pilosos. Los clientes sólo sienten calor y una ligera sensación de hormigueo, algunos incluso comparándolo con un ligero masaje. También utiliza la tecnología In-Motion, donde la pieza de mano puede estar siempre en movimiento sobre la piel.

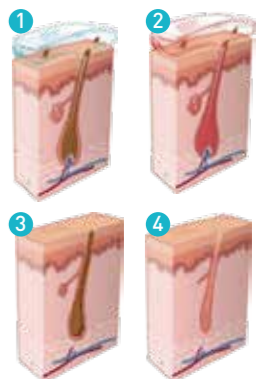



Co2 láser fraccional

Tubo de RF de metal, rejuvenecimiento de la piel, tratamiento ginecológico



Acné cicatrizal



Apriete vaginal



Piel de rejuvenecimiento



Eliminación Winkle



Un mango de escaneo, un mango de corte y uno vaginal

PARAMETRO: CO2 LÁSER FRACCIONAL	
Tubo láser RF	Tubo láser RF (fabricado por Coherent America)
Modo de trabajo	Modo fraccional Modo de onda continua (CW) Modo de pulso (simple y repetido) Modo Ultra Pulse
Longitud de onda láser	10600nm
Poder del generador láser	Máximo 60W
Potencia de salida	1-30W
Diámetro de enfoque	≤0,1-1,2 mm
Profundidad del tratamiento	Máximo 2 mm
Láser de diodo rojo	(650nm, ≤5mW)
Brazo de resorte de articulación de	7 articulaciones
Área de escaneo	20x20mm máximo
Forma de escaneo Elipse	rectangular, triangular, línea, cuadrado, hexágono
Modo de escaneo	Modo de secuencia, modo de división media, modo aleatorio
Sistema de extracción	de humo Soplado de aire incorporado
Sistema de refrigeración	Aire acondicionado
Temperatura ambiental	5°C 40°C
Humedad relativa	≤80%
Fuente de alimentación	220V±22V, 50Hz±1Hz
Dimensión	450mm X550mmX 1400mm
Peso	40kg



VENTAJAS TÉCNICAS

3 Cabezal de tratamiento:

Cabezal de corte, cabezal de exploración, cabezal vaginal 3 en 1.

Varias formas:

Forma diferente para un tratamiento diferente. área.

Estados Unidos importado:

LOS tubos de rf de metal importados de EE. UU. energía más estable.


Multifuncion:

Esta máquina puede rejuvenecer la piel, eliminación de cicatrices y estiramiento vaginal.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

Un mango de escaneo, un mango de corte y uno vaginal resolver.

SHE-LSP200 El rejuvenecimiento fraccional es una nueva Modalidad de tratamiento con láser que crea numerosos microscópicos zonas de lesiones térmicas de ancho, profundidad y densidad que están rodeados por un reservorio de epidermis salvado y tejido dérmico, lo que permite reparación rápida de inducida por láser lesión térmica.

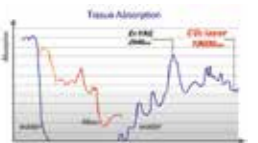



RF fraccioanda con microaguja

Radiofrecuencia fraccioanda con microaguja, El profundidad de aguja es ajustable.



Eliminar las arrugas profundas



reafirmante la piel



Eliminar ácne



Mango de microaguja Rf;
Mango de radiofrecuencia fraccional;
Mango de enfriamiento.

PARÁMETRO: RADIOFRECUENCIA	
Especificaciones	RF mono y bipolar
Frecuencia	2 MHz
Modo de funcionamiento	Sublativo de RF fraccional
dualMicroaguja RF fraccional	
Max. Energía	50W
Punta desechable	Aguja de microelectrodo Punta de microelectrodo
Profundidad de la aguja	0,5-3 mm (ajustable)
Cabeza de enfriamiento	-10 ° C
La pantalla	LCD de 10,4 pulgadas
Cambiar	Interruptor de pie
Requisitos eléctricos	CA / 100-240 V, 50-60 Hz
Tamaño de la mancha	12 x 12 mm (64 pines)
Tiempo de duración (emisión)	0,1-0,9 segundos
Tamaño de la mancha	12 * 12 mm (25 pines) 20 * 20 mm (49 pines)




VENTAJAS TÉCNICAS

- Sistema doble:** Esta máquina combina micro aguja y sistema de rf fraccional.
- Refrigeración:** Refrigeracion cabezal para reducir el dolor.
- Pofundidad:** 0.5-3.0mm ajustable por pantalla.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

Mango de microaguja Rf, Mango de radiofrecuencia fraccional, Piel Cabezal de enfriamiento. ELLA PXP004 PINXEL está diseñado especialmente para entregando energía de RF directamente a capa de epidermis o dermis para estimular y remodelar el colágeno eficazmente mediante microagujas de RF modo (invasivo) o modo de matriz de RF (no invasivo). Se puede utilizar tanto para epidermis aplicaciones y aplicaciones dérmicas en una plataforma siin cambiar ninguna entorno operativo.

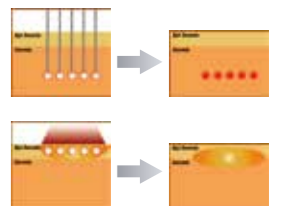



HIFU Facial Y Corporal

Lifting facial, sin tiempo de inactividad, resultado duradero.



Cara
Levantamiento



Piel
Apriete



Cara V
Tratamiento



Un cabezal de tratamiento, 3 cartuchos.

PARÁMETRO: HIFU FACIAL Y CORPORAL	
Tipo	Ultrasonido de enfoque de alta intensidad
Frecuencia	4MHz
Energía	200w
Profundidad del tratamiento	DS4-1.5 DS4-3.0 DS4-4.5 (DS4-8.0 DS4-13.0 opcional)
Duración del tratamiento	DS4-1.5: 5 --15 mm DS-3.0 / DS-4.5: 5 --25 mm
Energía	0,1 ---- 2,0j
Disparos Gap	1.0 --- 3 mm
Fuente de alimentación	CA 110V ~ 220V ~ 50Hz / 60Hz
Tamaño de la máquina y peso neto	400X350X335mm y 8.5Kg
Tamaño del paquete y peso bruto	525X445X465mm y 12Kg
Tamaño de la carretilla y peso neto	540X480X790mm y 10Kg
Tamaño del paquete de la carretilla	680X680X330mm y 15Kg
Peso bruto	




VENTAJAS TÉCNICAS

Sin tiempo de inactividad:	Sin sangrado, tratamiento no invasivo
Duradero Resultado:	Un tratamiento puede garantizar 2-3 años resultado.
Operación rápida:	El tratamiento completo de cara y cuello solo requiere 40-60 minutos.
Sesion:	Solo 1 sesion se puede alcanzar un buen efecto.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

TEORIA DEL TRATAMIENTO
El tratamiento científico es seguro y eficaz. HIFU se entrega a las profundidades piel y causa térmica coagulación a SMAS. Superficial Aponeurótico muscular cial Sistema).

Puede proporcionar a la piel un aclaramiento y un rejuvenecimiento gradualmente con el tiempo.

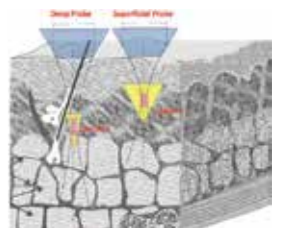



Maquina Capilar Laser

LED y laser analize cabello, 8000horas de brillo.



Crecimiento del cabello Cuidado del cuero cabelludo Analizadora de cabello



01. Analizador de cabello y piel.

Analizar el folículo del pelo y cabello, seguimiento del tratamiento, logrará el método exacto de tratamiento a través del análisis.

02. Pulverizador medicina.

Rocíe la solución cuidado de cabello como Minoxidil en los folículos pilosos, promover el transporte de oxígeno y los nutrientes a los folículos pilosos.

03. Pulma de pulverización de oxígeno.

Pulverizar la solución salina normal para hacer la limpieza y desinfección a la piel.

04. Peine Masaje con microcorriente.

Impulsar la abierta de vasos sanguíneos, y promover la absorción del medicamento.

PARAMETRO: CAPILAR LASER	
Potencia de salida láser	Láser de diodo de 650nm
Potencia de salida LED	Láser de infrarrojos de 808 nm Luz fría roja de 630nm
Tiempo de tratamiento	Luz fría azul de 460nm Luz fría amarilla de 580nm 0-60 min
Intervalo de tiempo pulsante	1-10 s
Rango de retardo pulsante	0-10 s
Potencia de entrada	Potencia de entrada 200w
Pantalla LCD	Pantalla táctil multicolor de 8 pulgadas
Voltaje de entrada nominal	AC230 10%, 50 Hz 1 Hz AC110V 10%, 60Hz 1Hz (opcional)



VENTAJAS TÉCNICAS

LED importada: LED japon importada.


Múltiple: Hay 3 LED y 2 láser.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

Acelerar la serie de crecimiento del cabello circulación sanguínea para mejorar capacidad de regeneración de las fibras de colágeno y promover metabolismo.

Regular las secreciones de aceite. Promover la salud del cuero cabelludo, mejorar calidad del cabello.

Promueve la absorción de nutrientes.

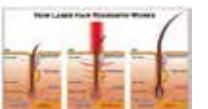



Magshape ondas electromagnéticas

7 Tesla, 3 Modos, 100HZ.



Desarrollo Muscular



Elevar Glúteos



Quema de grasa



3 tipos de mango para opcional:
Mango de brazos y piernas;
Mango para abdomen y gluteos;
Mango para suelo pelvico.

PARAMETRO: MAGSHAPE	
Onda electromagnética(energía)	0-7tesla
Potencia	2600w
Frecuencia	F1: 1-10Hz F2: 1-50Hz
Ancho de pulso	300us
Modo de trabajo	Modo inteligente) Modo profesional Modo suave
Pantalla	10,4 pulgadas
Mango de tratamiento	I-B1 / II-B2
Tamaño de la máquina	1200 mm * 420 mm * 550 mm
Tamaño del paquete	1210 mm * 580 mm * 815 mm
Peso neto	69kg
Peso bruto	93kg



VENTAJAS TÉCNICAS

7 tesla

7 Tesla garantiza una mejor resultado.

100hz


100 HZ de alta frecuencia hacen músculo más rápido.

3 modos

3 modos de tratamiento pueden cumplir diferentes demanda.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

El campo electromagnético de alta intensidad-EMT puede apuntar al nervio motor células para generar potencial de acción, que estimula directamente el músculo contracción. Se puede decir que "se puede hacer ejercicio acostado". Durante el tratamiento de 30 minutos, los músculos se contraen 30.000 veces con alta frecuencia y alta intensidad, que no pueden ser logrado en ejercicio general! Músculo la contracción extrema requiere una gran cantidad de suministro de energía, por lo que las células at junto al músculo también se consumen, que conduce a la apoptosis natural y Reducir el grosor de la grasa de forma eficaz.

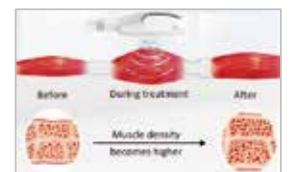



Portable ondas electromagnéticas

7 Tesla, 3 Modos, 100HZ.



Desarrollo Muscular



Elevar Glúteos



Quema de grasa



3 tipos de mango para opcional:

Mango de brazos y piernas;
Mango para abdomen y glúteos;
Mango para suelo pélvico.



PARAMETRO:MAGSHAPE	
Onda electromagnética(energía)	0-7tesla
Voltaje	110-220V 50-60 / Hz
Potencia de salida	2600w
Frecuencia	F1: 1-10Hz F2: 1-50Hz
Ancho de pulso	300us
Modo	modelo-I (modo inteligente), modelo-II (modo profesional) modelo-III (modo suave)
Pantalla	10,4 pulgadas
Mango de tratamiento	I-B1 / II-B2
Tamaño de la máquina	340 mm * 380 mm * 645 mm
Tamaño del paquete	660mm * 490mm * 695mm
Peso neto	19kg



VENTAJAS TÉCNICAS


7 tesla: 7 Tesla garantiza una mejor resultado.

100HZ 100 HZ de alta frecuencia hacen músculo más rápido.

3 Modos 3 modos de tratamiento pueden cumplir diferentes demanda.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

El campo electromagnético de alta intensidad-EMT puede apuntar al nervio motor células para generar potencial de acción, que estimula directamente el músculo contracción. Se puede decir que "se puede hacer ejercicio acostado". Durante el tratamiento de 30 minutos, los músculos se contraen 30.000 veces con alta frecuencia y alta intensidad, que no pueden ser logrado en ejercicio general! Músculo la contracción extrema requiere una gran cantidad de suministro de energía, por lo que las células at junto al músculo también se consumen, que conduce a la apoptosis natural y Reducir el grosor de la grasa de forma eficaz.

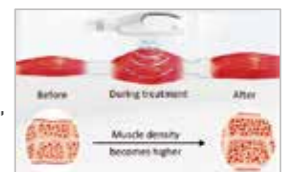



Velashape

Remodelación corporal, reafirmante la piel, eliminar las arrugas.



Elimina las celulitis Remodelación corporal Reafirmante la piel




1. Grande rodillo de vací
2. Radiofrecuencia vacum
3. Cavitacion
4. Pequeño rodillo de vací



Puede elegir diferentes cabezales de tratamiento en esta pantalla.

PARÁMETRO: VELASHAPE	
Pantalla	táctil de 12 pulgadas
Modo de trabajo	pulso
Longitud de onda	láser 940 nm
Asas totales	4 asas 6 puntas 123 mm * 88 mm; 66 * 40 mm; 43 * 30 mm; 17 * 10 mm; 14 * 9 mm; 10 * 4 mm (solo para la cara)
Velocidad del rodillo	0-36r / m
Frecuencia de radiofrecuencia	1 MHz
Frecuencia de cavitación	40KG
Intensidad de vacío	30-85 (Kpa)
Voltaje	AC220V ± 10%, 10A 50Hz / AC110V ± 10%, 10A 60Hz

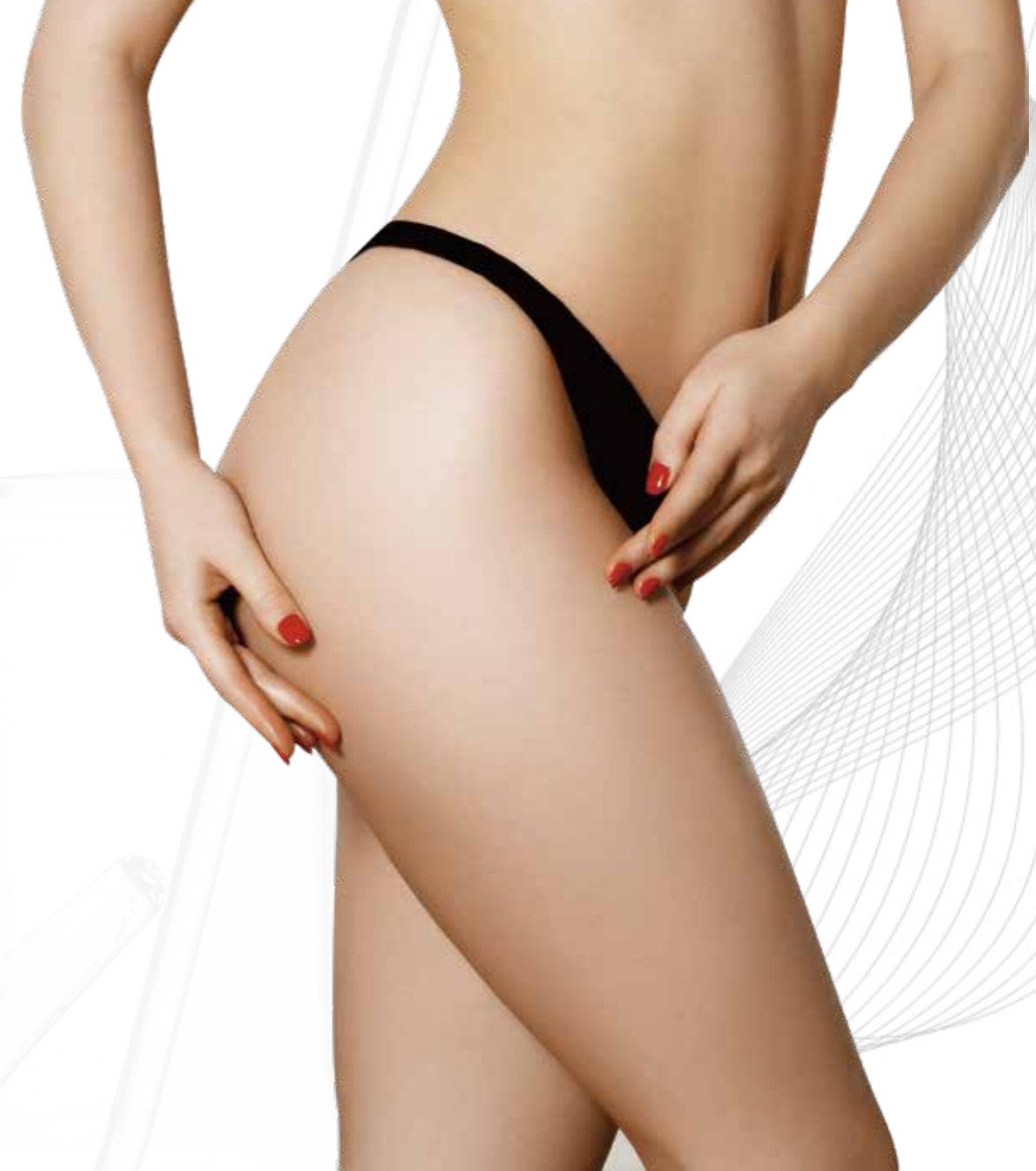

VENTAJAS TÉCNICAS

4 cabezales de tratamiento

Perder peso ,Remodelación corporal y rejuvenecimiento.

Sin tiempo de inactividad:


Solo necesito 1-3 sesiones para ver obviamente resultado.

Rentable negocio:

Conductor empresarial rentable demanda del paciente.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

La combinación de las tecnologías IR y RF acopladas al vacío provoca un calentamiento profundo del tejido conectivo, incluido el tejido fibroso septos que a su vez promueve un aumento en el depósito de colágeno y metabolismo celular local que resulta en una reducción localizada de la piel laxitud y volumen. La manipulación mecánica adicional del tejido de la Vela provoca un aumento inmediato de la circulación y linfático Drenaje, ambos componentes esenciales para la estructura sana de la piel.

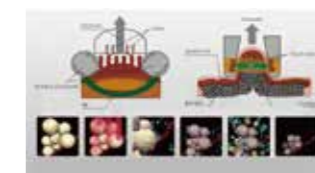



Criolipolisis Adelgazamiento Corporal

4manipulos para el tratamiento de cuerpo.



Perder peso



Remodelación corporal



Quema la grasa



Hay 4 manipulados de crio
Hay una pantalla en el manipuloso para operar.

PARÁMETRO: CRIOLIPÓLISIS	
Pantalla LCD	Pantalla táctil a color de 12 pulgadas
potencia de entrada	2000W
Potencia de salida	1000W
Vacío	0kpa-100kpa
Manipulos	1 X mango A: 220 * 76 * 125 mm 2 X mango B: 160 * 56 * 65 mm 1 x mango C: 125 * 45 * 70 mm
Temperatura de enfriamiento	-15-5 ° C
Tamaño del paquete	71 * 52 * 128 cm
Peso bruto	95 kilogramos
Voltaje	AC220V + 10%, 50 Hz AC110V + 10%, 60 Hz
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire + refrigeración por agua + refrigeración por semiconductores



VENTAJAS TÉCNICAS


Vacío: 0-100KPA

Manipulo: 4 tamaños del manipuloso para tratar diferentes zonas de cuerpo.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

La máquina de forma fría de criolipólisis es una nueva y no invasiva forma de reducir la grasa de manera suave y efectiva en áreas específicas del cuerpo que da como resultado un notable aspecto natural reducción de grasa en las áreas tratadas.

Los triglicéridos de las grasas se convertirán en sólido en particular temperaturas bajas.

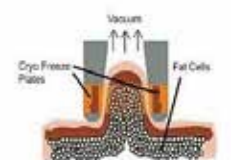



Salushape Reduccion Grasas

Adelgazar todo el cuerpo.



Cuerpo adelgazamiento



Estiramiento de la piel



La quema de grasa



Ultrasonido Focalizado para tratar abdomen, muslos y nalgas.



Cavitación para brazos y piernas.



Bipolar RF para rejuvenecimiento de piel.

PARÁMETRO: SALUSHAPE REDUCCION GRASAS

Potencia de entrada	10-400w
Profundidad de enfoque	12 mm
Temperatura del cabezal de enfriamiento	-5 C ~ -5 C
Vida útil del tratamiento de la pieza de mano	500.000 disparos
Dimensiones de la máquina	530 * 900 * 550 mm
Dimensiones del paquete	875X505X545mm
Dimensiones de la máquina	22kg
Peso del paquete	39kg
Requerimientos de energía	10V-240V, 10A monofásico
Requisito medioambiental	+ 15C-30C, 80% de humedad

P36



VENTAJAS TÉCNICAS

HIFU:

Utiliza Ultrasonido Focalizado para reducir grasas.

Multifuncional:


Ultrasonido Focalizado y cavitacion y RF

Sin tiempo de inactividad:

El tratamiento es no quirúrgico, no sangre, indolora.

TEORIA DEL TRATAMIENTO

Salushape sistema es un no invasivo equipo de modelación del cuerpo que usa Focalizado Pulsado Ultrasonido, también combina cavitación, radiofrecuencia bipolar, y semi-conductor tecnología de refrigeración para destruir las células grasas inmediatamente y de forma selectiva sin tiempo de inactividad y dolor para todas las partes del cuerpo.

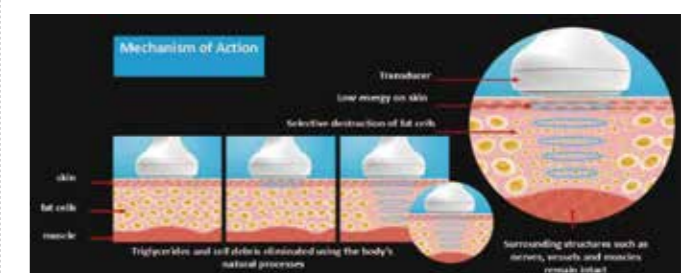

P37